

地址:苏州工业园区新平街388号腾飞创新园A2-1004室  
服务热线:400-829-9200

邮箱:sales@realgen-bio.com  
网址:www.realgen-bio.com



# 酶联免疫吸附试剂盒

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA



# 酶联免疫吸附试剂盒

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA




酶联免疫吸附测定 (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA) 指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上, 利用抗原抗体特异性结合进行免疫反应的定性和定量检测方法。具有操作简单、快速、敏感性高、特异性强等优势, 是科学研究中的常用实验手段。

睿杰生物可为您的生物学研究提供覆盖人、小鼠、大鼠、兔、猴、猪、犬等反应性物种, 高品质的ELISA试剂盒。我们的ELISA产品经过严格的质检, 确保体系稳定, 线性范围好, 特异性和灵敏度高。


## 实验原理

利用抗原抗体的特异性反应原理。将抗原或抗体固相化及抗原或抗体酶标记, 加入酶反应的底物后, 底物被酶催化成为有色产物, 产物的量与标本中受检物质的量直接相关, 由此进行定性或定量分析。

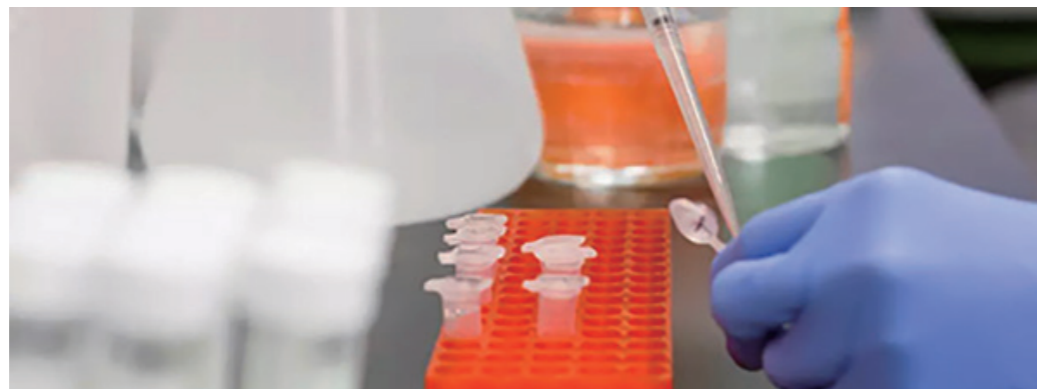

## ELISA的分类

根据ELISA实验原理及操作的不同, 可以将ELISA大致分为四种: **直接法、间接法、夹心法和竞争法**

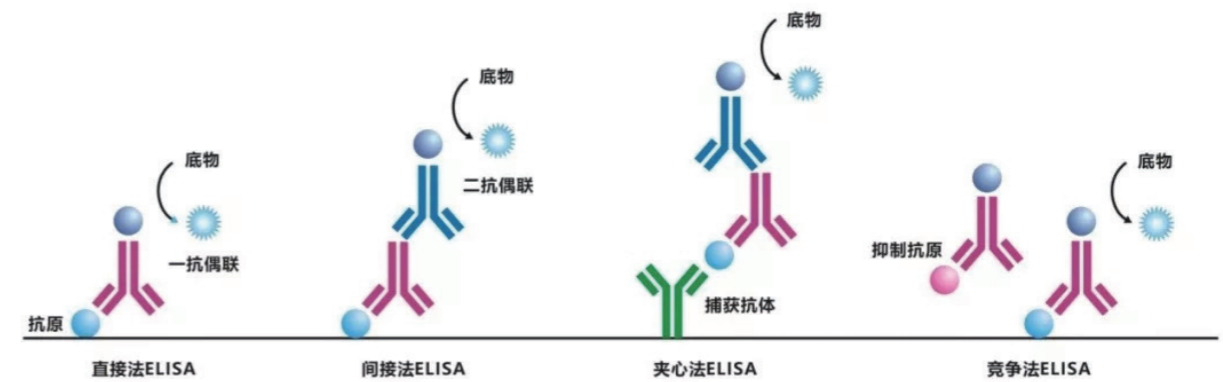

### 直接法

将抗原固定于多孔板上, 酶标抗体直接检测抗原。

### 间接法

先将抗原结合到多孔板上, 随后分两步进行检测: 首先加入检测抗体与抗原特异性结合, 随后加入酶标二抗检测并利用底物显色。

### 夹心法

先将捕获抗体固定于多孔板中, 然后加入样品, 接着加入检测抗体。捕获抗体和检测抗体是特定于抗原的不同表位的两种抗体, 又称为配对抗体。如果检测抗体是酶标抗体, 则可称为直接夹心ELISA; 如果检测抗体不带有标记, 则还需要使用其他偶联酶的检测分子与检测抗体结合, 这种称为间接夹心ELISA。

### 竞争法

预先将抗原包被在多孔板上, 并加入酶标记的特异性抗体。实验时, 加入待检抗原 (或抗体), 如果待检物是抗原, 则待检抗原与预先包被在多孔板上的抗原竞争结合酶标抗体; 如果待检测物是抗体, 则待检抗体就与系统中原有的酶标抗体竞争结合包被在多孔板上的抗原。通过洗涤洗掉被竞争结合的酶标抗体, 最后加底物显色。需要注意的是显色结果与待检抗原 (或抗体) 的量成反比。

## 不同ELISA类型的优缺点

	优点	缺点
直接法	1.实验步骤少;	1.抗原不是特异性固定的,样本中的靶蛋白及其他杂质蛋白都会与ELISA板结合,实验背景会比较高;
	2.检测速度快;	2.每种靶蛋白都需要准备能够与其特异性结合的一抗,实验不太灵活;
	3.不需要用到二抗,避免了交叉反应。	3.由于没有使用二抗,信号没有被放大。
间接法	1.不同的一抗能够与单一标记的二抗一同使用,有更高的灵活性;	1.存在交叉反应的可能性(酶标二抗直接与抗原结合);
	2.二抗与一抗结合,信号放大。	2.与直接法ELISA相比,间接法ELISA实验多了二抗孵育的步骤,实验周期延长。
夹心法	1.使用两种特异性抗体与抗原结合,有很高的特异性; 2.灵敏度高;	对对抗体要求较高,需要针对同一靶标且能识别其不同表位,并要求不存在交叉反应。
竞争法	1.其他三种ELISA类型都适用于竞争法ELISA的形式; 2.适用于小分子抗原。	方法较复杂。

## ELISA常见问题及解决方法

问题	可能原因	解决方案
背景偏高	清洗不当	按照操作规程清洗,清洗间隙增加浸润时间
	交叉污染	及时更换吸头,避免交叉污染。清洗后将孔内溶液吸干
	底物原因	加入底物前,确保颜色为无色,出现淡蓝色会造成背景偏高
	生物素化抗体、酶等稀释不当	确保按照操作规程稀释
无信号	酶标板不合适	采用高吸附性酶标板
	错误操作	确保按照操作规程实验
	酶抑制剂	清洗液、酶稀释液中避免出现叠氮钠等酶抑制剂
	清洗不当	按照正确流程清洗
	标准品稀释不当	按照标准品处理流程操作
孵育时间过短	增加孵育时间	
信号偏弱	试剂储存不当	按照试剂盒储存要求保存
	酶标仪波长选择不当	确认酶标仪设定参数
	酶标板选择不合适	选择高吸附性酶标板
	清洗不当	按照正确流程清洗
	样品混合问题	确保样品有效混匀
平行性差	酶标板污染	使用前检查酶标板是否有污染和刮伤
	酶标板选择不合适	选择优质酶标板
	试剂过期	使用前检查试剂是否在有效期内

ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RG001-1	Alpha Fetoprotein ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RG001-2	Alpha Fetoprotein ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGB040-1	Bovine IL-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGB040-2	Bovine IL-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGB080-1	Bovine IL-8 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	12.5-800pg/mL	6.25pg/mL
RGB080-2	Bovine IL-8 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	12.5-800pg/mL	6.25pg/mL
RGB703-1	Bovine IgG ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGB703-2	Bovine IgG ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGB803-1	Bovine IFN- $\gamma$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGB803-2	Bovine IFN- $\gamma$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGC080-1	Canine IL-8 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	12.5-800pg/mL	6.25pg/mL
RGC080-2	Canine IL-8 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	12.5-800pg/mL	6.25pg/mL
RGC803-1	Canine IFN- $\gamma$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGC803-2	Canine IFN- $\gamma$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGCEA-1	Carcino Embryonic Antigen ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGCEA-2	Carcino Embryonic Antigen ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGCK803-1	Chicken IFN- $\gamma$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGCK803-2	Chicken IFN- $\gamma$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGG040-1	Goat IL-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGG040-2	Goat IL-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH011-1	Human IL-1 $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH011-2	Human IL-1 $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH012-1	Human IL-1 $\beta$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	2.3-150pg/mL	1.1pg/mL
RGH012-2	Human IL-1 $\beta$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	2.3-150pg/mL	1.1pg/mL
RGH013-1	Human IL-1RA ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH013-2	Human IL-1RA ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH020-1	Human IL-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	1.9pg/mL
RGH020-2	Human IL-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	1.9pg/mL
RGH020-1H	Human IL-2 High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	1.95-125pg/mL	1pg/mL
RGH020-2H	Human IL-2 High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	1.95-125pg/mL	1pg/mL
RGH021-1	Human IL-2sR $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH021-2	Human IL-2sR $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH030-1	Human IL-3 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH030-2	Human IL-3 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH040-1	Human IL-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	2.3-150pg/mL	1.1pg/mL

ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGH040-2	Human IL-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	2.3-150pg/mL	1.1pg/mL
RGH040-1H	Human IL-4 High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	0.78-50pg/mL	0.39pg/mL
RGH040-2H	Human IL-4 High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	0.78-50pg/mL	0.39pg/mL
RGH050-1	Human IL-5 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	2.7pg/mL
RGH050-2	Human IL-5 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	2.7pg/mL
RGH060-1	Human IL-6 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	3.9-250pg/mL	0.98pg/mL
RGH060-2	Human IL-6 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	3.9-250pg/mL	0.98pg/mL
RGH060-1H	Human IL-6 High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	0.78-50pg/mL	0.39pg/mL
RGH060-2H	Human IL-6 High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	0.78-50pg/mL	0.39pg/mL
RGH063-1	Human IL-6R $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH063-2	Human IL-6R $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH070-1	Human IL-7 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH070-2	Human IL-7 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH080-1	Human IL-8 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.3-2000pg/mL	8.6pg/mL
RGH080-2	Human IL-8 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.3-2000pg/mL	8.6pg/mL
RGH080-1H	Human IL-8 High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGH080-2H	Human IL-8 High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGH090-1	Human IL-9 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH090-2	Human IL-9 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH100-1	Human IL-10 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	3.1-200pg/mL	1.5pg/mL
RGH100-2	Human IL-10 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	3.1-200pg/mL	1.5pg/mL
RGH100-1H	Human IL-10 High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	0.31-20pg/mL	0.15pg/mL
RGH100-2H	Human IL-10 High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	0.31-20pg/mL	0.15pg/mL
RGH110-1	Human IL-11 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH110-2	Human IL-11 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH121-1	Human IL-12/23p40 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH121-2	Human IL-12/23p40 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH122-1	Human IL-12p70 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.3-2000pg/mL	11.7pg/mL
RGH122-2	Human IL-12p70 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.3-2000pg/mL	11.7pg/mL
RGH130-1	Human IL-13 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	6.3-400pg/mL	1.6pg/mL
RGH130-2	Human IL-13 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	6.3-400pg/mL	1.6pg/mL
RGH150-1	Human IL-15 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH150-2	Human IL-15 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH171-1	Human IL-17A ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	5.9pg/mL
RGH171-2	Human IL-17A ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	5.9pg/mL

## ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGH171-1H	Human IL-17A High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	6.25-400pg/mL	3.125pg/mL
RGH171-2H	Human IL-17A High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	6.25-400pg/mL	3.125pg/mL
RGH172-1	Human IL-17E/IL-25 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH172-2	Human IL-17E/IL-25 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH173-1	Human IL-17F ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH173-2	Human IL-17F ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH174-1	Human IL-17A/F Heterodimer ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	0.156-10ng/mL	0.078ng/mL
RGH174-2	Human IL-17A/F Heterodimer ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	0.156-10ng/mL	0.078ng/mL
RGH175-1	Human IL-17B ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH175-2	Human IL-17B ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH180-1	Human IL-18 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH180-2	Human IL-18 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH210-1	Human IL-21 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	46.8-3000pg/mL	23.4pg/mL
RGH210-2	Human IL-21 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	46.8-3000pg/mL	23.4pg/mL
RGH220-1	Human IL-22 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH220-2	Human IL-22 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH230-1	Human IL-23 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH230-2	Human IL-23 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH240-1	Human IL-24 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	156.25-10000pg/mL	78 pg/mL
RGH240-2	Human IL-24 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	156.25-10000pg/mL	78 pg/mL
RGH270-1	Human IL-27 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH270-2	Human IL-27 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH290-1	Human IL-29 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH290-2	Human IL-29 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH310-1	Human IL-31 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	0.156-10ng/mL	0.08ng/mL
RGH310-2	Human IL-31 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	0.156-10ng/mL	0.08ng/mL
RGH330-1	Human IL-33 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH330-2	Human IL-33 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH361-1	Human IL-36 $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	31.3-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH361-2	Human IL-36 $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	31.3-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH362-1	Human IL-36 $\beta$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH362-2	Human IL-36 $\beta$ ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH363-1	Human IL-36 $\gamma$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	37.5-2400pg/mL	18.75pg/mL
RGH363-2	Human IL-36 $\gamma$ ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	37.5-2400pg/mL	18.75pg/mL
RGH370-1	Human IL-37 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL

## ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGH370-2	Human IL-37 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH380-1	Human IL-38 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH380-2	Human IL-38 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH410-1	Human Serum Amyloid A ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	0.78-50ng/mL	0.39ng/mL
RGH410-2	Human Serum Amyloid A ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	0.78-50ng/mL	0.39ng/mL
RGH411-1	Human Eotaxin ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	4.69-300pg/mL	2.35pg/mL
RGH411-2	Human Eotaxin ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	4.69-300pg/mL	2.35pg/mL
RGH412-1	Human MCP-3 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	0.156-20ng/mL	0.078ng/mL
RGH412-2	Human MCP-3 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	0.156-20ng/mL	0.078ng/mL
RGH413-1	Human MMP-7 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH413-2	Human MMP-7 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH414-1	Human ST2 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH414-2	Human ST2 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH415-1	Human ACE2 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	3.9-250ng/mL	1.95ng/mL
RGH415-2	Human ACE2 ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	3.9-250ng/mL	1.95ng/mL
RGH416-1	Human progranulin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH416-2	Human progranulin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH418-1	Human BMP-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH418-2	Human BMP-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH419-1	Human Osteoprotegerin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH419-2	Human Osteoprotegerin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH420-1	Human HB-EGF ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH420-2	Human HB-EGF ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH421-1	Human PD-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.9-250pg/mL	1.6pg/mL
RGH421-2	Human PD-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,280	3.9-250pg/mL	1.6pg/mL
RGH422-1	Human PD-L1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	156.3-10000pg/mL	78pg/mL
RGH422-2	Human PD-L1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	156.3-10000pg/mL	78pg/mL
RGH423-1	Human Tie-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	78.1-5000pg/mL	39.1pg/mL
RGH423-2	Human Tie-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	78.1-5000pg/mL	39.1pg/mL
RGH424-1	Human Dickkopf-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	31.3pg/mL
RGH424-2	Human Dickkopf-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	31.3pg/mL
RGH601-1	Human MMP-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH601-2	Human MMP-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH609-1	Human MMP-9 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH609-2	Human MMP-9 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL

## ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGH701-1	Human IgA ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGH701-2	Human IgA ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGH702-1	Human IgE ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	0.469-30ng/mL	0.23ng/mL
RGH702-2	Human IgE ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	0.469-30ng/mL	0.23ng/mL
RGH703-1	Human IgG ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	0.78-50ng/mL	0.39ng/mL
RGH703-2	Human IgG ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	0.78-50ng/mL	0.39ng/mL
RGH707-1	Human IgG4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000ng/mL	7.8ng/mL
RGH707-2	Human IgG4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000ng/mL	7.8ng/mL
RGH708-1	Human IgM ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	3.125-200ng/mL	1.56ng/mL
RGH708-2	Human IgM ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	3.125-200ng/mL	1.56ng/mL
RGH710-1	Human VEGF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH710-2	Human VEGF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH711-1	Human VCAM-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH711-2	Human VCAM-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH712-1	Human $\beta$ -NGF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH712-2	Human $\beta$ -NGF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH714-1	Human IGF-BP1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	46.8-3000pg/mL	23.4pg/mL
RGH714-2	Human IGF-BP1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	46.8-3000pg/mL	23.4pg/mL
RGH716-1	Human Insulin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	0.78-50 $\mu$ IU/mL	0.39 $\mu$ IU/mL
RGH716-2	Human Insulin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	0.78-50 $\mu$ IU/mL	0.39 $\mu$ IU/mL
RGH717-1	Human IP-10 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	3.9-250pg/mL	1.9pg/mL
RGH717-2	Human IP-10 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	3.9-250pg/mL	1.9pg/mL
RGH719-1	Human Leptin ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH719-2	Human Leptin ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH722-1	Human MIG ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH722-2	Human MIG ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH723-1	Human PAI-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH723-2	Human PAI-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH725-1	Human PDGF-BB ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH725-2	Human PDGF-BB ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH726-1	Human Perforin ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	39-2500pg/mL	14.7pg/mL
RGH726-2	Human Perforin ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	39-2500pg/mL	14.7pg/mL
RGH727-1	Human PIGF-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH727-2	Human PIGF-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH728-1	Human RANTES ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	2-125pg/mL	0.74pg/mL

## ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGH728-2	Human RANTES ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	2-125pg/mL	0.74pg/mL
RGH729-1	Human Resistin ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH729-2	Human Resistin ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH730-1	Human sCD40L ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH730-2	Human sCD40L ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH731-1	Human SCF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH731-2	Human SCF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH732-1	Human SDF-1 $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	31.25 pg/mL
RGH732-2	Human SDF-1 $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	31.25 pg/mL
RGH733-1	Human sICAM-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	0.47-30ng/mL	0.24ng/mL
RGH733-2	Human sICAM-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	0.47-30ng/mL	0.24ng/mL
RGH734-1	Human sRANK Ligand ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH734-2	Human sRANK Ligand ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH800-1	Human IFN- $\alpha$ 2 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	7.8-500pg/mL	3.2pg/mL
RGH800-2	Human IFN- $\alpha$ 2 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	7.8-500pg/mL	3.2pg/mL
RGH802-1	Human IFN- $\beta$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	0.313-20ng/mL	0.16ng/mL
RGH802-2	Human IFN- $\beta$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	0.313-20ng/mL	0.16ng/mL
RGH803-1	Human IFN- $\gamma$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	5.8pg/mL
RGH803-2	Human IFN- $\gamma$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	5.8pg/mL
RGH803-1H	Human IFN- $\gamma$ High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 2,980	1.95-125pg/mL	0.98pg/mL
RGH803-2H	Human IFN- $\gamma$ High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 4,480	1.95-125pg/mL	0.98pg/mL
RGH810-1	Human TNF- $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	1.95pg/mL
RGH810-2	Human TNF- $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	1.95pg/mL
RGH811-1	Human TWEAK ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH811-2	Human TWEAK ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH812-1	Human TL-1A ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH812-2	Human TL-1A ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH813-1	Human TNF- $\beta$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH813-2	Human TNF- $\beta$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH821-1	Human TGF- $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH821-2	Human TGF- $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH822-1	Human TGF- $\beta$ 1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	3.8pg/mL
RGH822-2	Human TGF- $\beta$ 1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	3.8pg/mL
RGH823-1	Human Latent TGF- $\beta$ 1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	1.56-100pM	0.78pM
RGH823-2	Human Latent TGF- $\beta$ 1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	1.56-100pM	0.78pM

## ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGH831-1	Human MCP-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	3.9-250pg/mL	1.45pg/mL
RGH831-2	Human MCP-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	3.9-250pg/mL	1.45pg/mL
RGH832-1	Human MCP-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	3.125-200pg/mL	1.56pg/mL
RGH832-2	Human MCP-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	3.125-200pg/mL	1.56pg/mL
RGH841-1	Human MIP-1 $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH841-2	Human MIP-1 $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH850-1	Human M-CSF ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH850-2	Human M-CSF ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH900-1	Human Adiponectin ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	0.31-20ng/mL	0.15ng/mL
RGH900-2	Human Adiponectin ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	0.31-20ng/mL	0.15ng/mL
RGH901-1	Human Albumin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	0.312-20ng/mL	0.156ng/mL
RGH901-2	Human Albumin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	0.312-20ng/mL	0.156ng/mL
RGH902-1	Human apoA1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	1.25-80ng/mL	0.63ng/mL
RGH902-2	Human apoA1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	1.25-80ng/mL	0.63ng/mL
RGH903-1	Human BAFF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH903-2	Human BAFF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH904-1	Human BD-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGH904-2	Human BD-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGH905-1	Human BD-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH905-2	Human BD-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH906-1	Human BD-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGH906-2	Human BD-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGH907-1	Human Betacellulin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	0.156-10ng/mL	0.078ng/mL
RGH907-2	Human Betacellulin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	0.156-10ng/mL	0.078ng/mL
RGH908-1	Human bFGF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH908-2	Human bFGF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH909-1	Human BMP-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH909-2	Human BMP-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGH910-1	Human CCL19 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH910-2	Human CCL19 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH911-1	Human MDC/CCL22 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH911-2	Human MDC/CCL22 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH912-1	Human CRP ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	15.7pg/mL
RGH912-2	Human CRP ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	15.7pg/mL
RGH913-1	Human CTACK ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL

## ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGH913-2	Human CTACK ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH914-1	Human CXCL16 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH914-2	Human CXCL16 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH915-1	Human CXCL4 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH915-2	Human CXCL4 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH916-1	Human EGF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH916-2	Human EGF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH917-1	Human TARC/CCL17 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH917-2	Human TARC/CCL17 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGH918-1	Human FGF-21 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH918-2	Human FGF-21 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH920-1	Human G-CSF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH920-2	Human G-CSF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH922-1	Human GM-CSF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.2-2000pg/mL	8.2pg/mL
RGH922-2	Human GM-CSF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.2-2000pg/mL	8.2pg/mL
RGH923-1	Human Granzyme B ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	2.6pg/mL
RGH923-2	Human Granzyme B ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	2.6pg/mL
RGH924-1	Human GRO beta ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGH924-2	Human GRO beta ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGH926-1	Human HGF ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH926-2	Human HGF ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH927-1	Human Neuroserpin ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH927-2	Human Neuroserpin ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGH928-1	Human NGAL ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	78.125-5000pg/mL	39.1pg/mL
RGH928-2	Human NGAL ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	78.125-5000pg/mL	39.1pg/mL
RGH929-1	Human Thioredoxin-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH929-2	Human Thioredoxin-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH930-1	Human Thrombopoietin ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH930-2	Human Thrombopoietin ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH931-1	Human TIMP-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH931-2	Human TIMP-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGH932-1	Human CXCL1/GRO $\alpha$ /NAP-3 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH932-2	Human CXCL1/GRO $\alpha$ /NAP-3 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGH934-1	Human TIMP-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGH934-2	Human TIMP-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	125-8000pg/mL	62.5pg/mL

ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGM701-1	Mouse IgA ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGM701-2	Mouse IgA ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGM702-1	Mouse IgE ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGM702-2	Mouse IgE ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGM703-1	Mouse IgG ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.156-10ng/mL	0.08ng/mL
RGM703-2	Mouse IgG ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.156-10ng/mL	0.08ng/mL
RGM703-1H	Mouse IgG High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM703-2H	Mouse IgG High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM704-1	Mouse IgG1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.125-200ng/mL	1.56ng/mL
RGM704-2	Mouse IgG1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.125-200ng/mL	1.56ng/mL
RGM705-1	Mouse IgG2a ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.39-25ng/mL	0.19ng/mL
RGM705-2	Mouse IgG2a ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.39-25ng/mL	0.19ng/mL
RGM706-1	Mouse IgG2b ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.313-20ng/mL	0.156ng/mL
RGM706-2	Mouse IgG2b ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.313-20ng/mL	0.156ng/mL
RGM707-1	Mouse IgG3 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGM707-2	Mouse IgG3 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGM708-1	Mouse IgM ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.313-20ng/mL	0.16ng/mL
RGM708-2	Mouse IgM ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.313-20ng/mL	0.16ng/mL
RGM710-1	Mouse VEGF ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM710-2	Mouse VEGF ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM713-1	Mouse TSLP ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM713-2	Mouse TSLP ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM715-1	Mouse IGF-I ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM715-2	Mouse IGF-I ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM717-1	Mouse IP-10 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM717-2	Mouse IP-10 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM718-1	Mouse KIM-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM718-2	Mouse KIM-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM721-1	Mouse MDC ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	1.56-100pg/mL	0.78 pg/mL
RGM721-2	Mouse MDC ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	1.56-100pg/mL	0.78 pg/mL
RGM724-1	Mouse PD1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM724-2	Mouse PD1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM725-1	Mouse PDGF-BB ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM725-2	Mouse PDGF-BB ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM728-1	Mouse RANTES ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL

ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGM728-2	Mouse RANTES ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGM729-1	Mouse Resistin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM729-2	Mouse Resistin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM734-1	Mouse sRANK Ligand ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM734-2	Mouse sRANK Ligand ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM800-1	Mouse IFN- $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM800-2	Mouse IFN- $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM803-1	Mouse IFN- $\gamma$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	3.6pg/mL
RGM803-2	Mouse IFN- $\gamma$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	3.6pg/mL
RGM810-1	Mouse TNF- $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM810-2	Mouse TNF- $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM822-1	Mouse TGF- $\beta$ 1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	3.8pg/mL
RGM822-2	Mouse TGF- $\beta$ 1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	3.8pg/mL
RGM841-1	Mouse MIP-1 $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.125-200pg/mL	1.56pg/mL
RGM841-2	Mouse MIP-1 $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.125-200pg/mL	1.56pg/mL
RGM843-1	Mouse MIP-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM843-2	Mouse MIP-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM850-1	Mouse M-CSF ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM850-2	Mouse M-CSF ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM900-1	Mouse Adiponectin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM900-2	Mouse Adiponectin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM902-1	Mouse IFN- $\beta$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	6.25-400U/mL	3.13U/mL
RGM902-2	Mouse IFN- $\beta$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	6.25-400U/mL	3.13U/mL
RGM911-1	Mouse CCL21 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM911-2	Mouse CCL21 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM912-1	Mouse CRP ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	23.44-1500pg/mL	11.7pg/mL
RGM912-2	Mouse CRP ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	23.44-1500pg/mL	11.7pg/mL
RGM915-1	Mouse CXCL4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM915-2	Mouse CXCL4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM918-1	Mouse FGF-21 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGM918-2	Mouse FGF-21 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGM922-1	Mouse GM-CSF ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM922-2	Mouse GM-CSF ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM942-1	Mouse BCMA ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	78.1-5000pg/mL	39.1pg/mL
RGM942-2	Mouse BCMA ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	78.1-5000pg/mL	39.1pg/mL

ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGH941-1	Human Vitamin D Binding Protein ELISA	48 tests	¥ 2,480	0.78-50ng/mL	0.39ng/mL
RGH941-2	Human Vitamin D Binding Protein ELISA	96 tests	¥ 3,780	0.78-50ng/mL	0.39ng/mL
RGM011-1	Mouse IL-1 α ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM011-2	Mouse IL-1 α ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM012-1	Mouse IL-1 β ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.4pg/mL
RGM012-2	Mouse IL-1 β ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.4pg/mL
RGM020-1	Mouse IL-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	5.8pg/mL
RGM020-2	Mouse IL-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	5.8pg/mL
RGM020-1H	Mouse IL-2 High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	3.125-200pg/mL	1.56pg/mL
RGM020-2H	Mouse IL-2 High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	3.125-200pg/mL	1.56pg/mL
RGM040-1	Mouse IL-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM040-2	Mouse IL-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM040-1H	Mouse IL-4 High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGM040-2H	Mouse IL-4 High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGM050-1	Mouse IL-5 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	7.8-500pg/mL	1.5pg/mL
RGM050-2	Mouse IL-5 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	7.8-500pg/mL	1.5pg/mL
RGM060-1	Mouse IL-6 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.3-2000pg/mL	9.6pg/mL
RGM060-2	Mouse IL-6 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.3-2000pg/mL	9.6pg/mL
RGM060-1H	Mouse IL-6 High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	3.125-200pg/mL	1.56pg/mL
RGM060-2H	Mouse IL-6 High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	3.125-200pg/mL	1.56pg/mL
RGM080-1	Mouse KC(IL-8) ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM080-2	Mouse KC(IL-8) ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM100-1	Mouse IL-10 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	9.4-600pg/mL	3.5pg/mL
RGM100-2	Mouse IL-10 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	9.4-600pg/mL	3.5pg/mL
RGM121-1	Mouse IL-12/23p40 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM121-2	Mouse IL-12/23p40 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGM122-1	Mouse IL-12p70 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	31.3-2000pg/mL	11.8pg/mL
RGM122-2	Mouse IL-12p70 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	31.3-2000pg/mL	11.8pg/mL
RGM130-1	Mouse IL-13 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM130-2	Mouse IL-13 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM150-1	Mouse IL-15 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	23.44-1500pg/mL	11.7pg/mL
RGM150-2	Mouse IL-15 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	23.44-1500pg/mL	11.7pg/mL
RGM160-1	Mouse IL-16 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM160-2	Mouse IL-16 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGM171-1	Mouse IL-17A ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	6.3-400pg/mL	1.9pg/mL

ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGM171-2	Mouse IL-17A ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	6.3-400pg/mL	1.9pg/mL
RGM171-1H	Mouse IL-17A High Sensitivity ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGM171-2H	Mouse IL-17A High Sensitivity ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	1.56-100pg/mL	0.78pg/mL
RGM172-1	Mouse IL-17E ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM172-2	Mouse IL-17E ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM173-1	Mouse IL-17F ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	23.44-1500pg/mL	11.7pg/mL
RGM173-2	Mouse IL-17F ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	23.44-1500pg/mL	11.7pg/mL
RGM174-1	Mouse IL-17A/F Heterodimer ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	46.88-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGM174-2	Mouse IL-17A/F Heterodimer ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	46.88-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGM175-1	Mouse IL-17B ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	312.5-20000pg/mL	156.25pg/mL
RGM175-2	Mouse IL-17B ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	312.5-20000pg/mL	156.25pg/mL
RGM176-1	Mouse IL-17D ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	93.75-6000pg/mL	46.88pg/mL
RGM176-2	Mouse IL-17D ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	93.75-6000pg/mL	46.88pg/mL
RGM180-1	Mouse IL-18 ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM180-2	Mouse IL-18 ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM210-1	Mouse IL-21 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	93.75-6000pg/mL	46.88pg/mL
RGM210-2	Mouse IL-21 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	93.75-6000pg/mL	46.88pg/mL
RGM220-1	Mouse IL-22 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGM220-2	Mouse IL-22 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGM230-1	Mouse IL-23 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM230-2	Mouse IL-23 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM270-1	Mouse IL-27 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM270-2	Mouse IL-27 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGM271-1	Mouse IL-27p28 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.63-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM271-2	Mouse IL-27p28 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.63-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGM330-1	Mouse IL-33 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGM330-2	Mouse IL-33 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGM331-1	Mouse IL-33R ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.313-20ng/mL	0.16ng/mL
RGM331-2	Mouse IL-33R ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.313-20ng/mL	0.16ng/mL
RGM421-1	Mouse PD-L1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,280	15.6-1000pg/mL	7.8 pg/mL
RGM421-2	Mouse PD-L1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8 pg/mL
RGM424-1	Mouse Dickkopf-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.3pg/mL
RGM424-2	Mouse Dickkopf-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.3pg/mL
RGM609-1	Mouse MMP-9 ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	312.5-20000pg/mL	156.25pg/mL
RGM609-2	Mouse MMP-9 ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	312.5-20000pg/mL	156.25pg/mL

ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGMK013-1	Monkey IL-1RA ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGMK013-2	Monkey IL-1RA ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGMK020-1	Monkey IL-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGMK020-2	Monkey IL-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGMK040-1	Monkey IL-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGMK040-2	Monkey IL-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGMK050-1	Monkey IL-5 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGMK050-2	Monkey IL-5 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGMK060-1	Monkey IL-6 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6~1000pg/mL	7.61pg/mL
RGMK060-2	Monkey IL-6 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6~1000pg/mL	7.61pg/mL
RGMK121-1	Monkey IL-12/23p40 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGMK121-2	Monkey IL-12/23p40 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGMK130-1	Monkey IL-13 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGMK130-2	Monkey IL-13 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGMK701-1	Monkey IgA ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGMK701-2	Monkey IgA ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGMK703-1	Monkey IgG ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.78-50ng/mL	0.39ng/mL
RGMK703-2	Monkey IgG ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.78-50ng/mL	0.39ng/mL
RGMK708-1	Monkey IgM ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.125-200ng/mL	1.56ng/mL
RGMK708-2	Monkey IgM ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.125-200ng/mL	1.56ng/mL
RGMK716-1	Monkey Insulin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.78-50 μ IU/mL	0.39 μ IU/mL
RGMK716-2	Monkey Insulin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.78-50 μ IU/mL	0.39 μ IU/mL
RGMK726-1	Monkey Perforin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	39-2500pg/mL	19.5pg/mL
RGMK726-2	Monkey Perforin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	39-2500pg/mL	19.5pg/mL
RGMK803-1	Monkey IFN-γ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGMK803-2	Monkey IFN-γ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGMK804-1	Monkey IFN-α pan ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	10.94-700pg/mL	5.47pg/mL
RGMK804-2	Monkey IFN-α pan ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	10.94-700pg/mL	5.47pg/mL
RGMK810-1	Monkey TNF-α ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	6.25-400pg/mL	3.125pg/mL
RGMK810-2	Monkey TNF-α ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	6.25-400pg/mL	3.125pg/mL
RGMK902-1	Monkey Apo A1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	1.25-80ng/mL	0.63ng/mL
RGMK902-2	Monkey Apo A1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	1.25-80ng/mL	0.63ng/mL
RGP012-1	Porcine IL-1β ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGP012-2	Porcine IL-1β ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGP020-1	Porcine IL-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL

ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGP020-2	Porcine IL-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGP040-1	Porcine IL-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	0.625-40ng/mL	0.312ng/mL
RGP040-2	Porcine IL-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	0.625-40ng/mL	0.312ng/mL
RGP060-1	Porcine IL-6 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGP060-2	Porcine IL-6 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	125-8000pg/mL	62.5pg/mL
RGP100-1	Porcine IL-10 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGP100-2	Porcine IL-10 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	46.875-3000pg/mL	23.44pg/mL
RGP220-1	Porcine IL-22 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGP220-2	Porcine IL-22 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGP703-1	Porcine IgG ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	0.39-25ng/mL	0.19ng/mL
RGP703-2	Porcine IgG ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	0.39-25ng/mL	0.19ng/mL
RGP716-1	Porcine Insulin ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	15.6-1000pmol/L	7.8pmol/L
RGP716-2	Porcine Insulin ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	15.6-1000pmol/L	7.8pmol/L
RGP803-1	Porcine IFN-γ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGP803-2	Porcine IFN-γ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGP810-1	Porcine TNF-α ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGP810-2	Porcine TNF-α ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGP822-1	Porcine TGF-β 1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	3.8pg/mL
RGP822-2	Porcine TGF-β 1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	3.8pg/mL
RGP922-1	Porcine GM-CSF ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	62.5-4000pg/mL	31.3pg/mL
RGP922-2	Porcine GM-CSF ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	62.5-4000pg/mL	31.3pg/mL
RGR011-1	Rat IL-1α ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGR011-2	Rat IL-1α ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGR012-1	Rat IL-1β ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR012-2	Rat IL-1β ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR020-1	Rat IL-2 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGR020-2	Rat IL-2 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGR040-1	Rat IL-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25 pg/mL
RGR040-2	Rat IL-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25 pg/mL
RGR060-1	Rat IL-6 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR060-2	Rat IL-6 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR080-1	Rat KC(IL-8) ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGR080-2	Rat KC(IL-8) ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGR100-1	Rat IL-10 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR100-2	Rat IL-10 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL

## ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGR171-1	Rat IL-17A ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGR171-2	Rat IL-17A ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGR180-1	Rat IL-18 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGR180-2	Rat IL-18 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGR609-1	Rat MMP-9 ELISA Kit	48 tests	¥ 3,180	156.25-10000pg/mL	78pg/mL
RGR609-2	Rat MMP-9 ELISA Kit	96 tests	¥ 5,180	156.25-10000pg/mL	78pg/mL
RGR701-1	Rat IgA ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.9-250ng/mL	1.95ng/mL
RGR701-2	Rat IgA ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.9-250ng/mL	1.95ng/mL
RGR702-1	Rat IgE ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	7.8-500ng/mL	3.9ng/mL
RGR702-2	Rat IgE ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	7.8-500ng/mL	3.9ng/mL
RGR703-1	Rat IgG ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGR703-2	Rat IgG ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGR704-1	Rat IgG1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGR704-2	Rat IgG1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	1.56-100ng/mL	0.78ng/mL
RGR705-1	Rat IgG2a ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.125-200ng/mL	1.6ng/mL
RGR705-2	Rat IgG2a ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.125-200ng/mL	1.6ng/mL
RGR706-1	Rat IgG2b ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.78-50ng/mL	0.4ng/mL
RGR706-2	Rat IgG2b ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.78-50ng/mL	0.4ng/mL
RGR708-1	Rat IgM ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	0.313-20ng/mL	0.16ng/mL
RGR708-2	Rat IgM ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	0.313-20ng/mL	0.16ng/mL
RGR710-1	Rat VEGF ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGR710-2	Rat VEGF ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGR725-1	Rat PDGF-BB ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR725-2	Rat PDGF-BB ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR731-1	Rat SCF ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGR731-2	Rat SCF ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGR803-1	Rat IFN- $\gamma$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGR803-2	Rat IFN- $\gamma$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	3.9-250pg/mL	1.95pg/mL
RGR810-1	Rat TNF- $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR810-2	Rat TNF- $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	62.5-4000pg/mL	31.25pg/mL
RGR822-1	Rat TGF- $\beta$ 1 ELISA Kit	48 tests	¥ 1,880	15.6-1000pg/mL	3.8pg/mL
RGR822-2	Rat TGF- $\beta$ 1 ELISA Kit	96 tests	¥ 2,780	15.6-1000pg/mL	3.8pg/mL
RGR831-1	Rat MCP-1 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGR831-2	Rat MCP-1 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGR841-1	Rat MIP-1 $\alpha$ ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL

## ELISA 试剂盒产品列表

货号	名称	规格	目录价	检测范围	灵敏度
RGR841-2	Rat MIP-1 $\alpha$ ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	7.8-500pg/mL	3.9pg/mL
RGR916-1	Rat EGF ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGR916-2	Rat EGF ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	15.6-1000pg/mL	7.8pg/mL
RGRB703-1	Rabbit IgG ELISA Kit	48 tests	¥ 2,480	39.1-2500pg/mL	19.5pg/mL
RGRB703-2	Rabbit IgG ELISA Kit	96 tests	¥ 3,780	39.1-2500pg/mL	19.5pg/mL
RGS040-1	Sheep IL-4 ELISA Kit	48 tests	¥ 2,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL
RGS040-2	Sheep IL-4 ELISA Kit	96 tests	¥ 3,080	31.25-2000pg/mL	15.6pg/mL



